




Poltrona 2MOTION

Appositamente concepito per gli operatori professionali più esigenti, 2MOTION è il progetto di Poltrona Podologica sviluppato dal Reparto di Ricerca e Sviluppo BTC.

Ergonomia e funzionalità soddisfano le esigenze del Podologo assicurando alte prestazioni e massimo comfort per il Cliente.

Caratteristiche principali:

- 2 attuatori Linak per gestire elettricamente e in modo indipendente i movimenti di salita / discesa e inclinazione
- La poltrona può raggiungere la posizione di Trendelenburg
- Movimento dello schienale regolabile tramite molla a gas
- Braccioli ribaltabili a fissaggio dorsale
- Gambali telescopici: angolo di apertura di 90° e movimento verticale 0-90°
- Rotazione di 115° a destra e sinistra con blocco a leva
- Posizione lettino a qualsiasi altezza
- Posizione "zero" per facilitare l'accesso del Cliente
- Capacità di sollevamento: 225 kg.

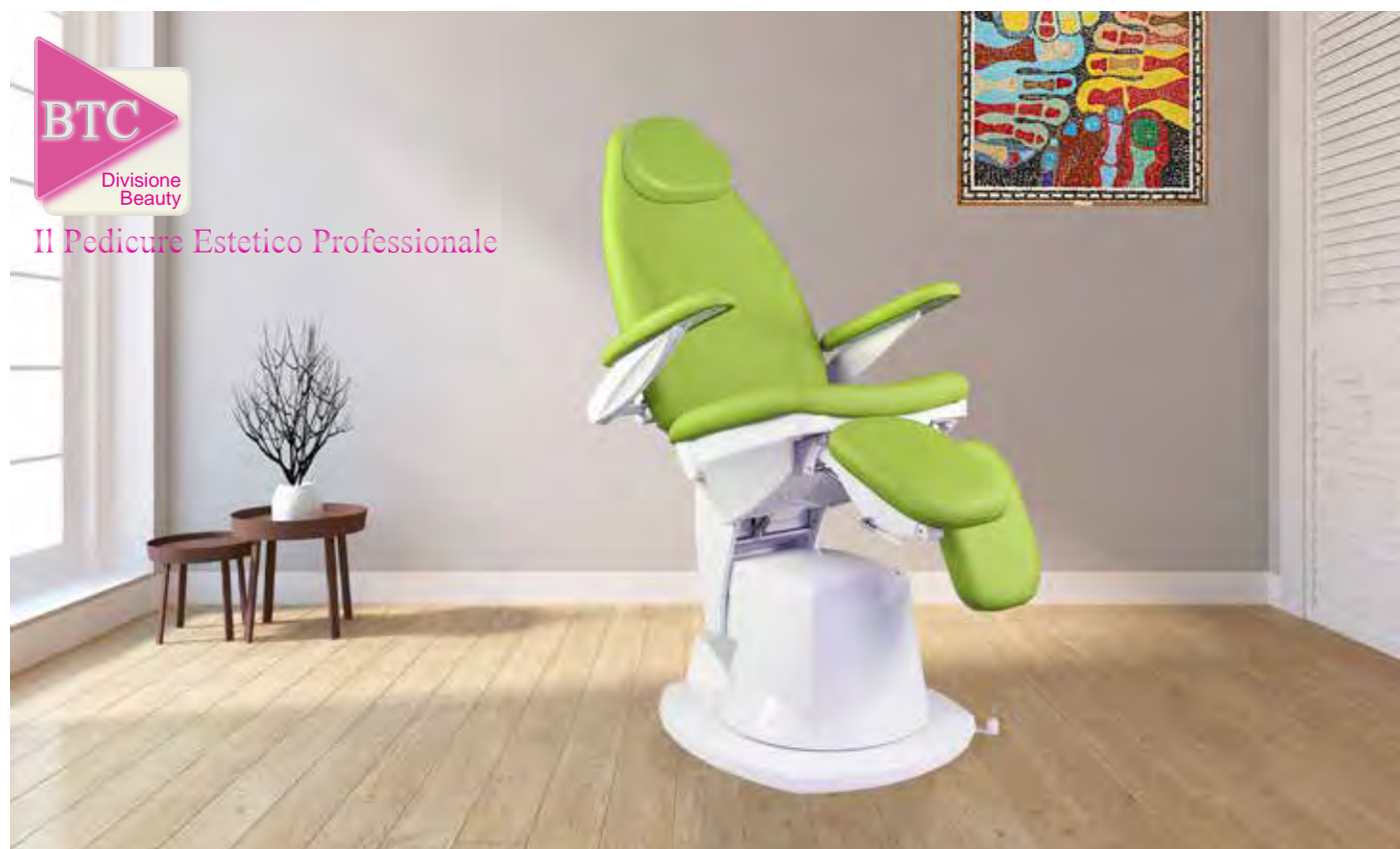



codice	descrizione
9110339	2MOTION R
9110336	2MOTION F



memorie



plug & work



disinfezione



ritorno a zero



2 motori

55 colori disponibili





ritorno a zero



Ritorno a zero. La poltrona raggiunge automaticamente la posizione "0" per facilitare l'accesso e la discesa del Cliente.



ergonomia



145 cm

La poltrona raggiunge un'altezza massima di 145 cm con massima estensione del gambale.



ergonomia



multi-
trattamento



-115°

+115°

La rotazione della poltrona segue un movimento meccanico orizzontale di 230°. La leva posizionata nella parte inferiore della poltrona consente all'Operatore di frizionare o bloccare la rotazione.

FORNITO SOLO NELLA VERSIONE "R"



95 cm

2MOTION raggiunge la posizione di lettino perfetta ed a qualsiasi altezza per garantire il massimo comfort per l'Operatore durante l'esame o il trattamento professionale. Altezza massima 95 cm.



Braccioli imbottiti e sincronizzati per un accesso facilitato del Cliente. Sempre parallelo alla seduta.

FORNITO NELLA VERSIONE STANDARD



codice	descrizione
9110301	POGGIATESTA

Poggiatesta anatomico regolabile per il massimo comfort del Cliente.

OPZIONALE



codice	descrizione
9110421	KIT CUSCINI INTERSPAZIALI MOTION

Kit per completare la posizione a lettino della poltrona. Elementi di imbottitura tra lo schienale e il sedile e tra il sedile e i gambali.

OPZIONALE



codice	descrizione
9110211	KIT VASCHEE

Kit vaschette in polipropilene da fissare ai gambali.

OPZIONALE



codice	descrizione
9110223	MEMORY FOAM

Materiale viscoelastico in schiuma indeformabile per il massimo comfort del Cliente.

OPZIONALE




Gambali telescopici divaricabili a 90° con movimento verticale di 90° regolabile dalla leva laterale.

FORNITO NELLA VERSIONE STANDARD



Il gambale è estensibile fino a 20 cm sul suo asse di supporto.

FORNITO NELLA VERSIONE STANDARD

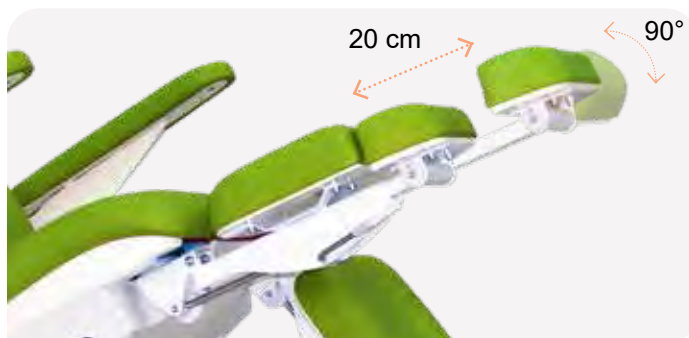


Gambale sdoppiato regolato manualmente, dotato di supporti in acciaio Inox. Posizionamento preciso e confortevole del piede del Cliente in grado di fornire una visuale perfetta e completa dell'area di trattamento.

OPZIONALE



Gambali standard

FORNITO NELLA VERSIONE STANDARD

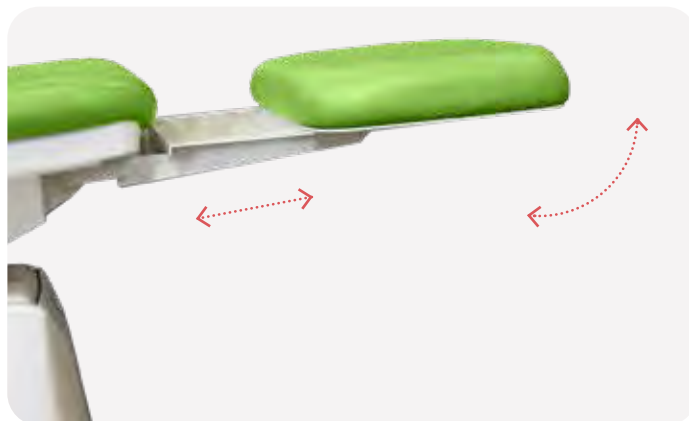

Gambale unico con movimento azionato da una leva meccanica o da un attuttore lineare.

OPZIONALE



codice	descrizione
9110133	PEDALE 6 TASTI

Pedale di comando



Comando a pedale BTC con Possibilità di una posizione memorizzata: Posizione "0"

FORNITO NELLA VERSIONE STANDARD

Pedale di comando

Comando a pedale BTC con Possibilità di una doppia posizione memorizzata: Posizione "0" e Altezza Massima.

OPZIONALE

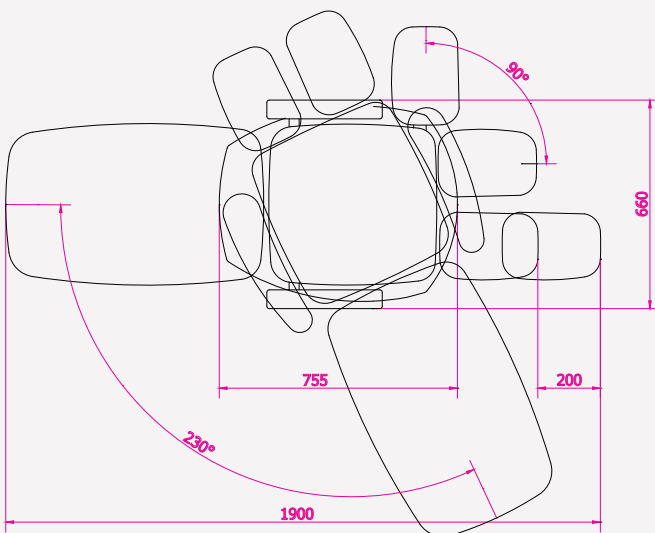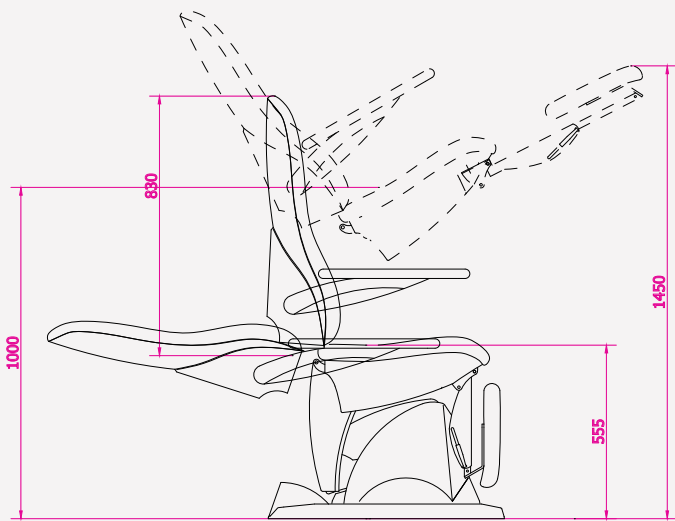

Alimentazione	110- 230 V 50- 60 Hz
Tensione di rete	24 V
Assorbimento	350 W
Capacità di carico	210 Kg
Capacità di carico sul gambale	25 Kg
Capacità di carico sul bracciolo	35 Kg
Capacità di carico sullo schienale	65 Kg
Peso della poltrona	105 Kg